


beurer

PULSSOKSÜMEETER


PO 13 Kids

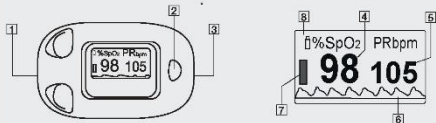

1. Kanderihma hoidik
2. Funktsiooninupp
3. Sõrmeava
4. Hapnikutase (väärtus protsentidena)
5. Pulsisagedus (väärtus löökides minutis)
6. Pulsilaine (pletüsmograafiline laine; normaliseeritud)
7. Pulsiriba
8. Patarei laetuse näidik

KASUTAMINE

Patareide paigaldamine

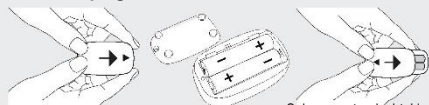

Keerake kruvi kruvikeerajaga lahti | Avage patareisihli kate

Paigaldage patareid, järgides õiget polaarust

Sulgege patareisihli | Keerake patareisihli kruviga kinni

Kanderihma paigaldamine



Esmakordne kasutamine



Asetage sõrm avasse ja hoidke seda paigal

Vajutage funktsiooninuppu ja püsige mõõtmise ajal paigal

Kuvatakse mõõdetud väärtused

! Sõrme väljavõtmisel lülitub seade mõne sekundi pärast välja.



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
Pulssoksümeeter, 2 x 1,5 V AAA-tüüpi patareid, kaitsekate, võõkott, kruvikeeraja, kasutusjuhend

MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboliteid:

⚠ HOIATUS!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või rasket vigastada.

⚠ ETTEVAATUST!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.

	Tooteteave Tähtis teave.		Järgige juhiseid Enne tegevuse alustamist ja/või seadmete kasutamist lugege juhiseid
	Elektronilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka		Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareid olmejäätmete hulka.
	Tootja		Tootmiskuupäev
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele.		Sorteeri paki osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali lühend, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp		Sorteeri toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Seade on kaitsitud 12,5 mm võõrkehade eest ja vee tilkumise eest nurga all		BF-tüüpi seade
	Seerianumber		Meditsiiniseade
	Temperatuurpiir		Niiskuspriir
	Pulsisagedus (lööki minutis)		Hemoglobiini arteriaalne hapnikutase (protsentides)
	Alarmi vaigistamine		Tüübi number
	Partii number		Importija
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus		Unikaalne seadme identifitseerimisnumber (UDI) unikaalseks seadme identifitseerimiseks
	Osa number		

KASUTUSEESMÄRK

Eesmärk

Seadet kasutatakse arteriaalse hapnikutaseme (SpO₂) ja südame löögisageduse (pulsisageduse) mitteinvasiivseks mõõtmiseks kodus ja haiglates (mitte AP ja APG keskkondades). Seade ei sobi pikemaajaliseks mõõtmiseks.

Sihtrühm

Seade sobib kasutamiseks vähemalt 1-aastatel isikutel, kellel esineb eelnevaid tervisehädaid ja ka ilma nendeta ning kellel on vaja mõõta arteriaalset hapnikutaset (SpO₂) ja südame löögisagedust (pulssi). Seade on mõeldud kasutamiseks lastele, kes kaaluvad 10-40 kg, kelle

sõrmeotsas on 7-11 mm laiused ja vähemalt 30 mm pikad ja kel puuduvad vastunäidustused seadme kasutamiseks. Alla 12-aastastele lastele tuleb seadme kasutamise ajal tagada järelevalve. Seadme kasutamise miinimumvanus sõltub lapse kaalust ja sõrme suurusest. Seetõttu võib seadme kasutamise miinimumvanus varieeruda.

Näidustused

Seade sobib kasutamiseks peamiselt riskipatsientidel ja südame-veresoonkonna haigustega, hingamisteede haigustega või uneapnoega lastel. Samuti sobib seade kasutamiseks lastel, kel esineb vähenenud hapnikutaseme sümptome (nt hinge kinnijäämine, suurem pulsisagedus, nõrkus, närvilisus või higistamishood).

Kliiniline kasu

Seadmega saab kiiresti ja hõlpsalt kindlaks määrata hapnikutaseme väärtuse ning selle vähenemise.

Vastunäidustused

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage seadet:

- kui teil on allergia kummi vastu;
- kui seade või sõrm on määrdunud;
- alla 1-aastastel imikutel;
- sõrmedel, millel on anatoomilised isearasused, ödeem, armid või põletushaavad;
- suurtel sõrmedel, mis ei mahu mugavalt seadmesse (sõrmeotsa laius umbes üle 11 mm);
- liiga peentel või lühikestel sõrmedel (laius $u < 7$ mm, pikkus $u < 30$ mm);
- patsientidel, kes ei püsi liikumatus;

Võimalikud kõrvaltoimed

- Sõrmevigastused (keemilised või termilised põletused, naha päevitamine, surveerosioon, tundlikkuse kadu, gangreen)
- Nende tüsistuste põhjustused võivad olla surveisheemia, seadme kasutamine pikema aja jooksul, mõttepea ülekuumenemine või väärkasutus, lühis
- Võimalikud mõõtmishälbed, kui sõrm on kahjustatud Sel juhul on mõõdetud SpO₂ väärtus liiga madal.
- SpO₂ mõõtmise madal täpsus kriitiliselt haigetel patsientidel: sisemine võimalik viga 3-4% sellistel patsientidel tehtud mõõtmistest.

HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult! Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju.

⚠ HOIATUS!

- Kontrollige, kas kõik vajalikud osad on pakendis olemas.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige seadet ja veenduge, et sellel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust Beureri klienditeenindusega või seadme volitatud edasimüüjaga.
- Ärge kasutage seadmel mingeid lisatarvikuid, mida tootja ei soovita või mida lisatarvikutena kaasas ei ole.
- Ärge kunagi avage seadet ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimise rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.
- Kui ekraanil asuv patarei laetuse taseme näidik annab teada, et patarei hakkab tühjenema, tuleb patareid vahetada.

Üldised hoiatused

- Seadme pikemaajalisem kasutamine võib vereringehäiretega inimestele valu põhjustada. Seetõttu ärge kasutage seadet ühel sõrmel järjest kauem kui 2 minutit.
- Seade kuvab kohe tulemust, kuid see ei sobi kasutamiseks pikemaajasel järgimisel. Seade on kalibreeritud nii, et see näitab funktsionaalselt hapnikutaset.
- Seadmel ei ole alarmifunktsiooni ja seetõttu ei sobi see meditsiiniliste tulemuste hindamiseks.
- Ärge pange endale ise diagnoosi ega ravide end saadud mõõtmistulemuste põhjal. Alati tuleb pidada arstiga nõu. Ärge võtke mingit uut ravimit ega muutke võetava ravimi tüüpi ega kogust ilma

eelnevalt arstiga nõu pidamata.

- Kui hapnikutaseme vähenemine krooniliselt, on seda vaja jälgida, kasutades pulssoksümeetriit arstliku järelevalve all. Akutselt madala hapnikutaseme (koos kaasnevate sümptomitega või ilma) põhjuse teadaasaamiseks tuleb pöörduda viivitamatult arsti poole. See võib olla eluohtlik olukord.
- Ärge vaadake mõõtmise ajal otse seadme korpusesse. Seadme punane tuli ja nähtamatu infrapunatuli on silmadele kahjulikud.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete ja vaimsete võimetega isikutele ega isikutele, kellel puuduvad kogemused või oskused seadme kasutamiseks (sh lapsed), väljaarvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke seadme pakend lastele kättesaamatus kohas (lapsed võivad selle suhu panna ja lämbuda).
- Pulsilaine ja pulsiriba ekraanil võimaldavad hinnata pulsi või vereringe tugevust mõõtmiskohas. Neid kasutatakse pigem üksnes hetke visuaalse signaali varemise kuvamiseks mõõtmiskohas ning need ei võimalda piisavalt usaldusväärset diagnostikat.
- Tugeva pigmendiga naha korral võivad tekkida mõõtmishälbed.
- Ärge kasutage seadet:
 - MRI või CT skaneeringu ajal;
 - patsiendi transportimisel muul viisil kui meditsiiniline transport;
 - sõrmel või käevarrel, mis on surve all (nt vererõhu mõõtmine käsivarre mansetti kasutades);
 - lakitud, määrdunud, plaastriga või muul viisil kaetud küüntel;
 - tule- ega plahvatusohtlike gaaside lähedal.
 - haiglates Ap ja APG keskkondades.

Üldised ettevaatusabinõud

Alljärgnevate juhiste eiramisel võivad tulemused olla valed:

- Mõõtmiseks kasutataval sõrmel ei tohi olla lakitud küünt, kunstküünt ega muud kosmeetikat.
- Veenduge, et mõõtmiseks kasutatava sõrme küüs on piisavalt lühike, nii et sõrmeots katab korpuse sensorilemmendi.
- Hoidke sõrm, käsi ja keha mõõtmise ajal paigal.
- Südame rütmihäiretega inimestel võivad arteriaalse hapnikutaseme SpO₂ ja südame löögisagedus olea valed või nende mõõtmine ei pruugi üldse võimalik olla.
- Elektroonilise kirurgiseadme või südamerüturi kasutamisel võib pulssoksümeetri töö olla häiritud.
- Vingumürgituse korral kuvab pulssoksümeeter liiga kõrge mõõtmistulemust.
- Mõõtmistulemuste õigsuse tagamiseks ei tohi seadme vahetus läheduses olla tugevaid valgusallikaid (nt luminofoorlambid või otsene päikesevalgus).
- Madala vererõhuga inimestel, kollatõbe põdejatel või südameravimide võtvatel patsientidel võivad mõõtmistulemused olla valed või ebastabiilsed.
- Mõõtmistulemused ei pruugi õiged olla ka patsientidel, kellele on manustatud meditsiinilisi värvaineid või kelle hemoglobiinitaseme on normipärsene. See kehtib eelõige vingumürgituse ja metahemoglobiini mürgistuse korral, mis võib tekkida näiteks kohaliku tuimestuse korral või metahemoglobiini vähenemisel.
- Mõõtmine ei pruugi anda õigeid tulemusi patsientidel, kellel on arteriaalne kateeter, kõrge vererõhk, soonte ahenemine, aneemia või hüpotermia.
- Kasutage seadet sobivates lubatud töökeskkonnas ja hoiutingimustes.
- Kaitske seadet tolmu, lõkide, niiskuse, äärmuslike temperatuuride ja plahvatavate materjalide eest.
- Ärge kasutage seadet tugevate elektromagnetväljade (nt mobiiltelefonide, raadiosaatjate) läheduses.
- Veenduge, et seade on enne mõõtmise alustamist toatemperatuuril. Kui seadet on hoitud maksimaalselt või minimaalselt hoidamises-või transporditemperatuuril lähedal ja seda kasutatakse keskkonnas, mille temperatuur on üle 20 °C, on soovitatav enne seadme kasutamist oodata vähemalt kaks tundi.
- Andmete keskmise arvutamine ja signaali töötlemine põhjustavad SpO₂ väärtuste uuendamisel viivitusi. Kui andmete uuendamise vahemik on alla 30 sekundi, siis dünaamiliste keskmiste väärtuste saamine aeg pikeneb, kui signaal on nõrgem, verevarustus on madal jms.
- Seadme töökorras oleku katsetamiseks võib kasutada funktsionaalsed testid, näiteks seadmed Fluke INDEX- 2LFE Simulator või Fluke Index ProSim 8 Simulator. Täpsemat teavet kasutamise kohta vt kasutusjuhendist.

- Funktsionaalseid testreid ei saa kasutada seadme täpsuse hindamiseks.

Märkused patareide kasutamise kohta

⚠ HOIATUS!

- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides nende polaarustähisteid (+ / -). Hoidke patareid puhtad ja kuivad ja veest eemal. Kasutage alati õiget tüüpi patareid.
- Ärge laske patareid ega patareisatili klemme lühisesse.
- Ärge laadige patareid, hoidke patareid eemal kuumusest, ärge võtke neid osadeks lahti ega kasutage moonduid patareidega muutke patareid mingil viisil.
- Patareid ei tohi joota ega liimida.
- Patareid kasutage koos erinevate tootjate patareid, uusi ja vanu patareid, erineva suurusega ja eri tüüpi patareid.
- **Plahvatusoht!** Eeltoodud juhiste eiramise tulemus võib olla isikuvigastus, seadme ülekuumenemine, leke, purunemine, plahvatus või tulekahju.
- Aku lekkimise korral puhastage akusahel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- **Lämbumisoht!** Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Patareid allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Patareid allaneelamine võib olla eluohtlik.
- Lapsed ei tohi patareid ilma järelevalveta vahetada.

⚠ ETTEVAATUST!

- Hoidke patareid eemal metallist esemetest ning hoiustage neid hästi õhutatud, kuivas ja jahedas kohas.
- Ärge jätke patareid otsese päikesevalguse ega vihma kätte.
- Patareide kasutusel kõrvaldamine äärmuslikult kõrgetel temperatuuridel või eriti madalal õhurõhul võib põhjustada nende plahvatamise või kergsüttivate vedelike ja gaaside lekke.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid sellest välja. Kui patareisatili katet ei saa enam korralikult sulgeda, ei tohi seadet kasutada.
- Kõrvaldage tühi patareid kasutuselt kohe ja ohutult. Patareid ei tohi visata tule ega asetada kuumu ahuju.

MÄRKUS

- Patareide kasutusel kõrvaldamisel eraldage need muudest elektrokeemilistest süsteemidest.

KASUTAMINE

Funktsiooninupp

- Seadme funktsiooninupul on kokku 2 funktsiooni:
- sisselülitamine: seadme sisse lülitamiseks vajutage funktsiooninuppu;
 - eredus: ekraani ereduse reguleerimiseks vajutage ja hoidke töötava seadme funktsiooninuppu all. Saate valida viie erineva eredusastme vahel.



Seadme ekraanipaigutus tehakse automaatselt (portree, maastik). Nii saab ekraanil olevaid väärtusi alati hõlpsalt lugeda olenemata sellest, kuidas seadet hoiate.

MÖÖTMISTE HINDAMINE

⚠ ETTEVAATUST!

Alljärgnev mõõtmistulemuste hindamise tabel ei kehti teatud isikutele (nt neile, kellele on astma, südame rütmihäired, hingamisteede haigused) või kõrgustele üle 1500 meetri. Sellise tingimuse korral pidage alati enne mõõtmistulemuste hindamist arstiga.

SpO ₂ (hapnikutase) mõõtmine %	Klassifikatsioon / võetavad meetmed mõõtmine %
99-94	Normaalne vahemik
93-90	Tavapärasest väiksem vahemik: soovitatav on pöörduda arsti poole
<90	Kriitiline vahemik: pöörduge kohe arsti poole.

Allikas: "Windisch W et al. European consensus-based (S2k) Guideline: Non-Invasive and Invasive Home Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure, Update 2017; Pneumologie 2017; 71: 722795"

Hapnikutaseme langemine sõltuvalt kõrgusest



Alljärgnevas tabelis on toodud teave erinevate kõrguste mõju kohta hapnikutaseme väärtusele ja selle mõju kohta inimkehale. Alljärgnev tabel ei kehti teatud seisunditega inimestele (nt astma, südame rütmihäired, hingamisteede, haigused jms). Teatud seisunditega inimestel võivad madalamatel kõrgustel tekkida haigustunnused (nt hapnikuvaegus).

Kõrgus	Eeldatav SpO ₂ väärtus (hapnikutase) %	Mõju inimkehale
1500-2500 m	>90	Ei ole kõrgushaigus (tavaliselt)
2500-3500 m	~ 90	Kõrgushaigus, organism vajab aklimatiseerumist
3500-5800 m	<90	Väga sageli esinev kõrgushaigus, organism vajab tingimata aklimatiseerumist
5800-7500 m	<80	Raske hüpoksia, sellele tasemele tohib inimene jääda vaid ajutiselt
7500-8850 m	<70	Kohene püsiv eluohtlik olukord

Allikas: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St.Louis, MO 1995; 1-37.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖ

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge puhastage seadet kõrgsurveseadmega ega steriliseerige etüleen-oksiidiga. Seadet ei tohi steriliseerida. Mitte mingil tingimusel ei tohi seadet panna üleni vette, sest vesi võib seadmesse pääseda selle rikkuda.
- Puhastage seadme korpus ja sisemist kummist pinda pehme, meditsiinilises alkoholis niisutatud lapiga.
 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kui kuu aja jooksul kasutada, võtke patareid sellest välja. Nii väldite võimalikke lekkeid.

HOIUSTAMINE

Pange seade hoiule kuiva kohta. Liiga kõrge niiskus võib lühendada seadme eluiga või seda kahjustada.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutusloobmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökohtmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Patareid ei tohi visata majapidamisprügi hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle. Akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:

Pb = sisaldab pliid,
Cd = sisaldab kaadmiumi.
Hg = sisaldab elavhõbedat



MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

Problem	Võimalik põhjus	Lahendus
"Finger out" kuvatakse ekraanile.	Sõrm, millelt mõõtmist tehakse, ei ole korralikult seadmesse sisestatud..	Sisestage sõrm uuesti seadmesse..
Mõõteväärtusi ei kuvata õigesti.	Mõõdetud SpO ₂ on liiga madal (<70%). Lähedal on tugev valgusallikas (nt luminofoorlamp või vahetu päikesevalgus)...	Korrake mõõtmist. Kui probleem püsib ja seade on töökorras, pöörduge kohe arsti poole. Viige seade selliste valgusallikate juurest kaugemale.
Seade ei kuva midagi või seda ei saa sisse lülitada.	Seadme patareid on tühi. Patareid ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage uued patareid. Sisestage patareid õigesti.

	Seade on rikkis.	Pöördeude klienditeenindusse.
Seade kuvab mõõtmistulemu se katkendlikult või hüppab kõrgele väärtusele..	Möödetavas sõrmes on ebapiisav vereringe.	Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi.
	Möödetav sõrm on liiga suur või liiga väike.	Sõrmeots peab olema järgmistele mõõtmetega: laius 7-11 mm, pikkus vähemalt 30 mm
	Sõrm, käsi või keha liigub.	Hoidke sõrm, käsi ja keha mõõtmise ajal paigal.
	Südame rütmihäired	Pöördeude arsti poole.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	PO 13 Lapsed
Mõõtmisviis	Mitteinvasiivne mõõtmine sõrmest, hemoglobiini arteriaalne hapnikutase ja pulsisagedus
Mõõtmisvahemik	SpO ₂ 0-100%, puls 30-250 lööki minutis
Täpsus	SpO ₂ 70-100%, ± 2%, alla 70% määratlemata Puls ≤99 bpm +/- 2 bpm, ≤100 bpm +/- 2%
Mõõtmed	P 59 mm x L 37 mm x K 35 mm
Kaal	Ligikaudu 27 g (ilma patareideta)
SpO ₂ mõõtmise sensor	Punane valgus (lainepikkus 660 nm), optiline väljundvõimsus < 6,65 mW; infrapun (lainepikkus 905 nm), optiline väljundvõimsus < 6,75 mW; rāni vastuvõtja diodid See teave võib olla praktiline eelkõige arstidele
Töökeskonna tingimused	+10 °C kuni +40 °C, ≤75% suhteline niiskus, Ümbritseva keskkonna rõhk 700-1060 hPa
Hoiukoha tingimused	-40 °C kuni +60 °C, ≤ 95% suhteline niiskus,
Toiteallikas	2 x 1,5 V — AAA-tüüpi patareid
Patarei tööiga	2 AAA-patareid kestavad u 2,5 aastat, 3 kui tehakse üks mõõtmine päevas (60 sekundit)
Seadme eeldatav eluiga	Teavet seadme eluea kohta leiate meie veebisaidilt
Klassifikatsioon	IP22, kohaldatav osa, tüüp BF
Ekraan	TFT

Seerianumber asub seadmel või patareisahklis.
Seadme tehnilisi näitajaid võidakse etteateamiseta muuta.

- Vastab Euroopa standardile EN 60601-1-2 (grupp 1, klass B, kooskõlas standarditega CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 ja IEC 61000-4-8).Seadme suhtes kohaldatakse spetsiaalseid ettevaatusabinõusid seoses elektromagnetilise ühilduvusega. Palun pidage meeles, et kaasaskantavad ja mobiilsed kõrgsageduslikud sidevahendid võivad seadme tööd häirida. Täpsema teabe saamiseks pidage nõu meie klienditeenindusega. Kontaktandmed leiate sellest juhendist.
- Käesolevaga garanteerime, et toode vastab Euroopa direktiivile 2014/53/EÜ. Toote vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt: www.beurer.com/web/web-landingpages/de/cedecelarationofconformity.php

Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta

- Seade sobib kasutamiseks kõikides keskkondades, mis on toodud nendes juhistes, sealhulgas kodune keskkond.
- Elektromagnetiliste häirete olemasolul ei pruugi seade olla täielikult kasutatav. Selle tulemusena võib seadme töös esineda tõrkeid või ekraanile ilmuvaid veateateid.
- Ärge kasutage seda seadet teiste seadmete vahetus läheduses ega teiste seadmete peal, sest see võib põhjustada tõrkeid seadme töös. Kui seadet on siiski vaja eespool toodud viisil kasutada, jälgige nii seadet kui ka teisi seadmeid tähelepanelikult ja veenduge, et need töötavad nõuetekohaselt.
- Muude tarvikute kui siintoodud või tootja soovitatud kasutamine võib suurendada elektromagnetilist emissiooni või vähendada seadme elektromagnetilist immuunsust. Selle tulemusena võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Hoidke kaasaskantavaid raadiosageduslikke seadmeid (sealhulgas lisaseadmed nagu antennijuhthmed või välised antennid) kõikidest seadme osadest vähemalt 30 cm kaugusel, sh kõik seadme komplekti kuuluvad juhtmed.
- Eespool toodud teabe eiramisel ei pruugi seade nõuetekohaselt töötada.

GARANTII / TEENINDUS

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Juhtumitest teavitamine

Kasutajatele/patsientidele Euroopa Liidus ja sellele samastes reguleerivates süsteemides (EU meditsiiniseadmete määrus (MD) 2017/745) kehtib järgmine: kui toote kasutamise ajal või selle tulemusel leiab aset tõsine juhtum, teavitage sellest tootjat ja/või tema esindajat ning kasutaja/patsiendi liikmesriigi vastavat asutust. Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda võidakse muuta ilma etteatamiseta.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00
Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



Importija Ühendkuningriigis:
BEURER UK Ltd., Suite 16,
Stonecross Place, Yew Tree Way WA32SH Golborne, United Kingdom

